

STRIX

VACUUM

VACUUM THERAPY

Advanced Solution for
Stretch Mark Treatment

درمان تخصصی استرچ مارک

ترکیب فناوری وکیوم کنترل شده و لیزر کم توان ۶۵۰ نانومتر
برای تحریک بازسازی طبیعی پوست.

Advanced Vacuum Therapy combined with 650nm
Low Level Laser for natural skin regeneration.



POWERFUL VACUUM STIMULATION

Enhances microcirculation,
increases oxygen supply and
stimulates collagen production.

تحریک قوی وکیوم

افزایش گردش خون، اکسیژن رسانی
و تحریک تولید کلاژن



IMPROVES SKIN STRUCTURE

Helps to reorganize collagen
fibers and improve skin
elasticity and texture.

بهبود ساختار پوست

بازسازی کلاژن و افزایش الاستیسیت
و بهبود بافت پوست



REDUCES STRETCH MARKS

Visibly reduces the
appearance of stretch marks
and uneven skin texture.

کاهش استرچ مارک

کاهش قابل مشاهده ظاهر استرچ
مارک‌ها و ناهمواری‌های پوست



SAFE & NON-INVASIVE

Comfortable treatment
with no downtime.

ایمن و غیرتهاجمی

درمانی راحت بدون نیاز به
دوران نقاهت



PROFESSIONAL & EFFECTIVE

Designed for professional
clinical use with outstanding
results.

حرفه‌ای و موثر

طراحی شده برای استفاده حرفه‌ای
در کلینیک‌ها با نتایج قابل اعتماد



VACUUM THERAPY

وکیوم درمانی



LOW LEVEL LASER 650nm

لیزر کم توان ۶۵۰ نانومتر



STIMULATES COLLAGEN PRODUCTION

تحریک تولید کلاژن



IMPROVES SKIN TEXTURE & ELASTICITY

بهبود بافت و الاستیسیت پوست



SAFE & EFFECTIVE TREATMENT

درمان ایمن و موثر

STRETCH MARK

استرچ مارک چیست؟



استرچ مارک چگونه ایجاد می شود؟

What Causes Stretch Marks?

استرچ مارک زمانی ایجاد می شود که پوست در اثر کشش سریع، مانند بارداری، افزایش یا کاهش وزن، دوران بلوغ با رشد عضلات، بیش از ظرفیت طبیعی خود کشیده شود. در این شرایط، رشته های کلاژن و الاستین در لایه درمیس دچار آسیب شده و خطوطی با رنگ قرمز، صورتی یا سفید روی پوست ظاهر می شوند.

Stretch marks develop when the skin is stretched beyond its natural capacity due to pregnancy, rapid weight changes, puberty, or muscle growth. This process disrupts collagen and elastin fibers within the dermis, leading to visible linear marks on the skin.



Pregnancy
بارداری



Weight Changes
تغییرات وزن



Muscle Growth
رشد عضلات



Puberty
دوران بلوغ



Collagen Damage
آسیب به کلاژن



Skin Elasticity
کاهش الاستیسیت

استرچ مارک یک آسیب ساختاری پوست است، نه صرفاً یک مشکل ظاهری.


Stretch Marks Are Structural Skin Damage,
Not Just a Cosmetic Concern.

WHY ARE STRETCH MARKS DIFFICULT TO TREAT?

چرا درمان استرچ مارک دشوار است؟

آسیب استرچ مارک فقط در سطح پوست نیست؛ تغییرات اصلی در لایه درم و در شبکه کلاژن و الاستین رخ می‌دهد. به همین دلیل، بهبود ظاهر استرچ مارک نیازمند تحریک هدفمند بافت، تقویت گردش خون موضعی و حمایت از فرایند طبیعی بازسازی پوست است.

Stretch marks are not merely a surface concern. The primary structural changes occur within the dermis and affect the collagen and elastin network. Improving their appearance therefore requires targeted tissue stimulation, enhanced local circulation and support for the skin's natural regeneration process.

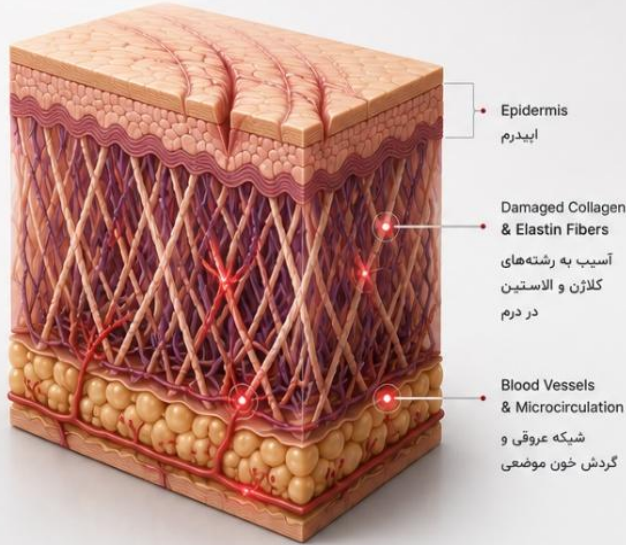

WHAT SKIN NEEDS FOR VISIBLE IMPROVEMENT

پوست برای بهبود قابل توجه به چه چیزی نیاز دارد؟



Controlled Dermal
Stimulation

تحریک کنترل شده درم



Improved Circulation
& Oxygenation

بهبود گردش خون و
اکسیژن‌رسانی



Collagen & Elastin
Remodeling

حمایت از بازسازی
کلاژن و الاستین



Gradual &
Controlled Treatment

درمان تدریجی و
قابل کنترل



چالش‌های درمان

Treatment Challenges



دسترس‌ی به لایه درم

رسیدن تحریک درمانی مؤثر به محل
تغییرات ساختاری پوست

Targeting the Dermal Layer



بازسازی تدریجی بافت

ساخت کلاژن و الاستین فرایندی
زمان‌بر و زیستی است

Gradual Tissue Remodeling



تفاوت پاسخ پوست افراد

سن، نوع پوست، سن استرچ مارک و
شرایط بافت بر نتیجه اثر می‌گذارند

Individual Skin Response

STRIX برای پاسخ به همین نیازها
طراحی شده است

STRIX Is Designed Around
These Regenerative Needs

فناوری وکیوم؛ آغاز بازسازی طبیعی پوست

Vacuum Therapy: The First Step Toward Natural Skin Regeneration

فناوری وکیوم STRiX با ایجاد مکش کنترل شده، گردش خون را افزایش داده، فیبروبلاست ها را فعال کرده و مسیر طبیعی بازسازی پوست را آغاز می کند.

STRiX Vacuum Technology provides controlled tissue stimulation, enhances microcirculation, activates fibroblasts and initiates the natural skin regeneration process.

افزایش گردش خون موضعی
Enhanced Microcirculation

فعال سازی فیبروبلاست ها
Fibroblast Activation

تحریک تولید کلاژن و الاستین
Collagen & Elastin Stimulation

بهبود اکسیژن رسانی بافت
Improved Oxygenation

مکانیسم عملکرد وکیوم در 4 مرحله

Vacuum Action in 4 Key Steps



STEP 1
Controlled Vacuum
مکش کنترل شده

ایجاد مکش دقیق و کنترل شده روی پوست.
Precise and controlled suction applied to the skin.



STEP 2
Microcirculation Improvement
بهبود گردش خون موضعی

افزایش جریان خون و اکسیژن رسانی در ناحیه تحت درمان.
Enhanced blood flow and oxygen supply in the treated area.



STEP 3
Fibroblast Activation
فعال سازی فیبروبلاست ها

تحریک سلول های سازنده برای شروع فرایند بازسازی بافت.
Stimulation of fibroblasts to initiate tissue regeneration.



STEP 4
Natural Collagen Remodeling
بازسازی طبیعی کلاژن

افزایش تولید کلاژن و الاستین و بهبود ساختار و کیفیت پوست.
Increased collagen and elastin production for healthier, stronger skin.



VACUUM POWER
قدرت مکش تا 95 کیلوپاسکال
Professional Vacuum Power
Up to 95 kPa

ویژگی های منحصر به فرد هندپیس STRiX STRiX Handpiece Key Features

01

95 kPa Professional Vacuum
قدرت مکش تا 95 کیلوپاسکال

قدرت مکش بالا تا 95 کیلوپاسکال برای تحریک موثر بافت و افزایش گردش خون موضعی

High vacuum power up to 95 kPa effectively stimulates tissue and enhances local blood circulation.



02

Integrated Cylindrical Safety Filter
فیلتر استوانه ای محافظ

فیلتر داخلی مانع از ورود چربی، روغن و آلودگی های سطح پوست به سیستم وکیوم شده و به حفظ عملکرد پایدار دستگاه کمک می کند.

The internal cylindrical filter prevents oil, fat and impurities from entering the vacuum system and helps maintain stable device performance.



03

Engineered for Effective Tissue Contact

طراحی مهندسی شده برای تماس موثر با بافت
طراحی اختصاصی هندپیس، توزیع مناسب فشار و تماس پایدار با پوست را فراهم می کند تا مکش به صورت یکنواخت و موثر اعمال شود.

The specialized handpiece design ensures stable skin contact and optimal pressure distribution for uniform and effective vacuum application.



فناوری وکیوم STRiX با تمرکز بر تحریک کنترل شده بافت، شرایط مناسب برای شروع فرایند طبیعی بازسازی پوست را فراهم می کند.

STRiX Vacuum Technology provides controlled tissue stimulation to support the skin's natural regenerative process.

چرا از لیزر ۶۵۰ نانومتر استفاده می‌کنیم؟

Why 650nm?

طول موج ۶۵۰ نانومتر به طور ویژه در عمق پوست نفوذ کرده با تحریک میتوکندری میتوکندری سلول‌ها، فرایند تولید انرژی (ATP) را افزایش می‌دهد. این امر منجر به بهبود گردش خون، کاهش التهاب و حمایت از بازسازی کلاژن و الاستین می‌شود.

The 650nm wavelength penetrates deep into the skin and stimulates cellular mitochondria, increasing ATP production. This leads to improved circulation, reduced inflammation and supports collagen and elastin regeneration.



کاهش التهاب
و قرمزی

Reduces Inflammation
& Redness



بهبود گردش خون
موضعی

Improves Local
Blood Circulation



افزایش تولید انرژی
سلولی (ATP)

Boosts Cellular
Energy (ATP)



تحریک تولید
کلاژن و الاستین

Stimulates Collagen
& Elastin Production



تسریع بازسازی طبیعی
بافت پوست

Accelerates Natural
Tissue Regeneration

لیزر کم توان ۶۵۰ نانومتر

650nm Low Level Laser Therapy

تکمیل‌کننده قدرتمند درمان وکیوم

The Perfect Complement to Vacuum Therapy

هم‌افزایی با وکیوم درمانی Synergy with Vacuum Therapy

لیزر کم توان بلافاصله پس از وکیوم، با افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش التهاب، شرایط ایده‌آلی برای بازسازی بافت ایجاد و نتایج درمان را به شکل چشمگیری بهبود می‌بخشد.

Applied immediately after vacuum therapy, low level laser enhances oxygenation, reduces inflammation and creates optimal conditions for tissue regeneration, significantly improving treatment outcomes.



مکانیزم عملکرد لیزر کم توان

How Low Level Laser Works



STEP 1

جذب نور لیزر
توسط سلول‌ها
Laser light
absorbed by cells



STEP 2

تحریک میتوکندری
و افزایش ATP
Mitochondrial
stimulation &
ATP increase



STEP 3

بهبود گردش خون
و اکسیژن‌رسانی
Improved blood
flow & oxygenation



STEP 4

فعال‌سازی فیبروبلاست‌ها
و تولید کلاژن
Fibroblast activation
& collagen production



STEP 5

بازسازی و تقویت
بافت پوست
Tissue regeneration
& strengthening




650nm Low Level Laser

لیزر کم توان قرمز

- توان خروجی پایدار و ایمن
- نفوذ به عمق پوست بدون آسیب حرارتی
- مناسب برای انواع پوست

Optimal Penetration Depth

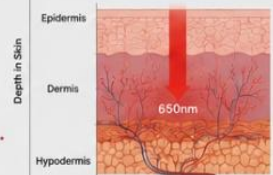

پروتکل درمانی استرچ مارک با STRIX

The STRIX Treatment Protocol

یک مسیر هوشمند، سه مرحله کلیدی برای بازسازی طبیعی پوست

A smart pathway in 3 key steps
for natural skin regeneration



STEP 1

Vacuum Therapy

- ✓ ایجاد مکش کنترل شده و یکنواخت
- ✓ افزایش گردش خون و اکسیژن رسانی
- ✓ تحریک فیبروبلاست ها و بهبود متابولیسم
- ✓ آماده سازی بافت برای جذب بهتر انرژی لیزر

Creates controlled and uniform suction
Improves blood flow and oxygenation
Stimulates fibroblasts and enhances cellular metabolism
Prepares the tissue for better laser energy absorption



STEP 2

650nm Low Level Laser

- ✓ نفوذ نور ۶۵۰ نانومتر به لایه های عمقی پوست
- ✓ افزایش تولید ATP و کاهش التهاب
- ✓ تقویت ساخت کلاژن و الاستین
- ✓ بهبود کیفیت و استحکام بافت پوست

650nm light penetrates deep into the skin
Increases ATP production and reduces inflammation
Boosts collagen and elastin synthesis
Improves skin quality and tissue strength



STEP 3

Natural Skin Regeneration

- ✓ بازسازی طبیعی کلاژن و الاستین
- ✓ افزایش استحکام و انعطاف پذیری پوست
- ✓ کاهش ظاهر استرچ مارک ها
- ✓ نتایج تدریجی، ایمن و ماندگار

Natural collagen and elastin remodeling
Improves skin firmness and elasticity
Visibly reduces the appearance of stretch marks
Long-lasting, safe and gradual results

ترکیب هوشمند دو فناوری قدرتمند برای نتایج بهتر و عمیق تر

Smart combination of two powerful technologies for deeper, better results



بهبود گردش خون
و اکسیژن رسانی
Improved Blood Flow
& Oxygenation



تحریک فیبروبلاست ها
و تولید کلاژن
Fibroblast Activation
& Collagen Production



کاهش التهاب
و قرمزی پوست
Reduced Inflammation
& Redness



بازسازی طبیعی
بافت پوست
Natural Tissue
Regeneration



درمان ایمن، غیرتهاجمی
و مناسب انواع پوست
Safe, Non-invasive
& Suitable for All Skin Types

موارد کاربرد STRiX

STRiX Applications

طراحی شده برای بهبود ظاهر استرچ مارک در نواحی مختلف بدن
Designed to improve the appearance of stretch marks in multiple body areas



شکم
بعد از بارداری
Abdomen
Post-Pregnancy



ران
Thighs



باسن
Buttocks



بازو
Arms



سینه
Breasts



پهلوی
Flanks

مناسب برای انواع استرچ مارک
Suitable for All Types of
Stretch Marks



استرچ مارک های
قرمز و صورتی (جدید)
Red & Pink
(New)



استرچ مارک های
سفید و نقره ای (قدیمی)
White & Silver
(Old)



بهبود رنگ، بافت و
انعطاف پذیری پوست
Improves Color, Texture
& Elasticity



ایمن و
برای انواع پوست
Safe & Suitable
for All Skin Types

ترکیب وکیوم تراپی و لیزر کم توان ۶۵۰ نانومتر،
راهکاری موثر برای بازسازی طبیعی پوست
و بهبود ظاهر استرچ مارک در نواحی مختلف بدن.

The combination of Vacuum Therapy and
650nm Low Level Laser provides an effective
solution for natural skin regeneration and
visible improvement of stretch marks.



مزایای کلیدی STRIX

STRIX Key Advantages

ترکیبی هوشمند از دو فناوری قدرتمند برای نتایج بهتر، ایمن تر و ماندگارتر

Smart combination of two powerful technologies for better, safer and longer-lasting results



95 kPa Vacuum Power

قدرت مکش تا 95 کیلوپاسکال

مکش حرفه‌ای برای تحریک عمیق بافت و بهبود گردش خون موضعی

Professional-grade suction for deep tissue stimulation and improved microcirculation



650nm Low Level Laser

لیزر کم توان 650 نانومتر

افزایش انرژی سلولی، کاهش التهاب و تحریک تولید کلاژن و الاستین

Boosts cellular energy, reduces inflammation and stimulates collagen & elastin production



Integrated Filter System

سیستم فیلتر استوانه‌ای داخلی

جلوگیری از ورود چربی و آلودگی به سیستم وکیوم و حفظ عملکرد پایدار دستگاه

Prevents oil, fat and impurities from entering the system and maintains stable performance



Ergonomic Handpiece

هندپیس ارگونومیک و ویژه

طراحی مهندسی شده برای اعمال بیشترین فشار مؤثر و تماس پایدار با پوست

Engineered design for optimal pressure delivery and stable skin contact



Non-Invasive & Safe

غیرتهاجمی و ایمن

بدون نیاز به جراحی، بی‌حسی یا دوره نقاهت مناسب برای انواع پوست

Non-invasive, no anesthesia or downtime Suitable for all skin types



No Downtime

بدون دوره نقاهت

بازگشت فوری به فعالیت‌های روزمره بدون محدودیت

Immediate return to daily activities without restrictions



Medical Grade Technology

فناوری پزشکی، نتایج حرفه‌ای

تکنولوژی ساخت پزشکی با کیفیت بالا برای نتایج مطمئن و قابل اطمینان

High quality medical technology for reliable and consistent results



Visible & Long-Lasting Results

نتایج قابل مشاهده و ماندگار

بهبود تدریجی، طبیعی و پایدار ظاهر استرچ مارک و کیفیت پوست

Gradual, natural and long-lasting improvement in stretch marks and skin quality

STRIX

ترکیب هوشمند قدرت مکش 95 کیلوپاسکال و لیزر کم توان 650 نانومتر با طراحی اختصاصی برای بازسازی طبیعی پوست و کاهش ظاهر استرچ مارک

STRIX combines 95 kPa Vacuum power and 650nm Low Level Laser with a unique design to support natural skin regeneration and visibly reduce the appearance of stretch marks.

مشخصات فنی دستگاه

STRiX Technical Specifications

طراحی شده برای عملکرد حرفه‌ای، برتر و ایمنی حداکثری

Engineered for professional performance,
superior results and maximum safety

مشخصه	Specification	جزئیات
قدرت وکیوم	Vacuum Power	تا 95 کیلوپاسکال Up to 95 kPa
طول موج لیزر	Laser Wavelength	650 ± 10 نانومتر 650nm ± 10nm
توان خروجی لیزر	Laser Output Power	تا 200 میلی‌وات Up to 200 mW
حالت تابش لیزر	Laser Mode	پیوسته (Continuous) Continuous (CW)
نمایشگر	Display	گرافیکی با نور پس‌زمینه Backlit Graphic LCD
منبع تغذیه	Power Supply	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz 150 VA
ابعاد دستگاه	Dimensions	320 (W) × 230 (D) × 140 (H) mm
وزن دستگاه	Weight	3.8 kg
هندپیس	Handpiece	هندپیس وکیوم تخصصی با فیلتر داخلی Professional Vacuum Handpiece with Integrated Filter
استانداردهای ایمنی	Safety Standards	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 Medical Grade



ایمن و قابل اعتماد
Safe & Reliable

طراحی مطلق با استانداردهای
بین‌المللی تجهیزات پزشکی

Designed in compliance with
international medical
equipment standards



عملکرد پایدار
Stable Performance

سیستم پیشرفته برای
عملکرد پایدار و طولانی‌مدت

Advanced system for
stable and long-term
performance



دقت بالا
High Precision

کنترل دقیق پارامترها برای
حداکثر اثربخشی درمان

Precise parameter
control for maximum
treatment efficiency



طراحی کاربردی
User-Friendly Design

رابط کاربری ساده و طراحی
ارگونومیک برای راحتی بیشتر

Simple interface and
ergonomic design for
optimal user experience

هندپیس اختصاصی STRiX

STRiX Professional Vacuum Handpiece

طراحی ارگونومیک، عملکرد دقیق و ایمن برای اثربخشی حداکثری در درمان استرچ مارک

Ergonomic design, precise performance and safe application
for maximum effectiveness in stretch mark treatment



Integrated Protective Filter

فیلتر استوانه‌ای داخلی

برای محافظت از سیستم وکیوم در برابر ورود چربی و آلودگی

Protects the vacuum system from debris, oils and contaminants

Transparent Chamber

محفظه شفاف

برای مشاهده عملکرد مکش و حفظ دید درمانگر

Allows clear visualization of suction performance and treatment area

Ergonomic Contact Surface

طراحی اختصاصی

برای تماس یکنواخت و اعمال فشار مناسب روی پوست

Ensures even contact and optimal pressure distribution for effective treatment

Precision Vacuum Channel

کانال وکیوم دقیق

برای ایجاد مکش پایدار و یکنواخت

Delivers stable and consistent vacuum flow for superior results



Integrated Filter

فیلتر داخلی

محافظت از موتور در برابر ورود چربی و آلودگی

Protects the motor from oils and contaminant intrusion



Medical Grade Materials

مواد سازگار با بدن

ساخته شده از مواد باکیفیت و مناسب استفاده پزشکی

Made from premium materials suitable for professional use



Ergonomic Design

طراحی ارگونومیک

طراحی سبک و خوش دست برای کنترل بهتر درمانگر

Lightweight and ergonomic design for better control and less fatigue



Stable Vacuum Flow

جریان مکش پایدار

ایجاد مکش یکنواخت و پایدار برای نتایج درمانی بهتر

Ensures consistent and stable vacuum for optimal treatment results

حالت های درمانی

STRIX Treatment Modes

سیستم وکیوم پیشرفته استریکس با سه حالت عملکردی، پاسخگوی نیازهای متنوع درمانی شما

Advanced vacuum system with three operational modes to meet diverse therapeutic needs



1

حالت پیوسته

Continuous Mode



ایجاد مکش یکنواخت و مداوم برای تحریک ملایم و افزایش گردش خون در نواحی وسیع

Provides consistent and continuous suction for gentle stimulation and enhanced blood circulation in large treatment areas



مناسب برای نواحی وسیع بدن
Suitable for large body areas

2

حالت متناوب

Intermittent Mode



مکش متناوب با ریتم تنظیم شده برای تحریک عمیق تر و بهبود مونتر بافت پوست

Alternating suction with adjustable rhythm for deeper stimulation and more effective skin tissue improvement



مناسب برای نواحی متوسط و عضلانی
Suitable for medium and muscular areas

3

حالت پالسی

Pulse Mode



مکش پالسی قوی برای تحریک نقطه ای، آزادسازی چسبندگی ها و تقویت بازسازی بافت در نواحی خاص

Strong pulsed suction for point stimulation, adhesion release and enhanced tissue regeneration in specific areas



مناسب برای نواحی دقیق و هدفمند
Suitable for precise and targeted areas

مزایای استفاده از حالت های درمانی استریکس

Benefits of STRIX Treatment Modes



انعطاف پذیری درمانی
برای انواع نیازهای کلینیکی

Therapeutic flexibility
for various clinical needs



افزایش اثربخشی درمان
با مکش هدفمند و قابل تنظیم

Enhanced treatment
efficacy with targeted
and adjustable suction



تجربه کاربری بهتر
با کنترل آسان و دقیق

Better user experience
with easy and precise
control



ایمنی بالا
و کاهش عوارض احتمالی

High safety and
reduced side effects



کاهش زمان درمان
و افزایش رضایت بیمار

Reduced treatment time
and increased patient
satisfaction



مناسب برای انواع پوست
و شرایط درمانی

Suitable for all skin types
and treatment conditions

مکانیسم عملکرد

STRiX Mechanism of Action

سیستم وکیوم استریکس با ایجاد مکش کنترل شده و ایمن، فرایندهای ترمیم طبیعی پوست را تحریک کرده و منجر به بهبود قابل توجه است استرج مارکهای می شود.


STRiX vacuum system delivers controlled and safe suction, stimulating the skin's natural healing processes and resulting in significant improvement of stretch marks.



فرآیند درمان در ۵ مرحله | 5-Step Treatment Process



Adjustable Suction Depth | عمق نفوذ مکش قابل تنظیم

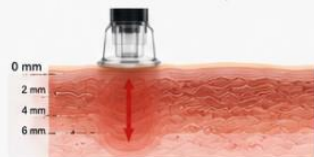

- سطحی (کم)
Shallow (Low)
- متوسط
Medium
- عمیق (زیاد)
Deep (High)

برای نواحی حساس و درمان های سطحی
For sensitive areas and superficial treatments

برای درمان عمومی و اکثر نواحی بدن
For general treatments and most body areas

برای استرج مارکهای عمیق و مقاوم
For deep and resistant stretch marks

لی مزایای مکانیسم عملکرد STRiX Benefits of STRiX Mechanism

ایمنی بالا با مکش کنترل شده و پایدار High safety with controlled and stable suction	دقت هدف گیری بالا در نواحی مورد نظر High targeting precision in desired areas	فعال سازی فرایندهای طبیعی ترمیم پوست Activation of natural skin healing processes
کاهش زمان درمان با اثربخشی بیشتر Reduced treatment time with higher efficacy	نتایج قابل مشاهده از جلسات اولیه Visible results from initial sessions	مناسب انواع پوست و نواحی مختلف بدن Suitable for all skin types and body areas

طراحی شده برای ایمنی و اثربخشی Engineered for Safety & Effectiveness

IEC
IEC 60601-1
Medical Electrical
Equipment Safety

CE
Medical
Grade

RoHS
Environmental
Protection

High Quality
& Reliability

ایمنی و موارد منع مصرف

STRIX Safety & Contraindications

استفاده صحیح و ایمن از دستگاه STRIX، اثربخشی درمان را افزایش داده و کمترین عوارض جانبی را تضمین می‌کند.

Proper and safe use of STRIX device enhances treatment effectiveness and ensures minimum side effects.



موارد منع مصرف Contraindications



زخم باز، عفونت فعال و التهاب پوستی در ناحیه درمان
Open wounds, active infections or skin inflammation in the treatment area



بیماری‌های بدخیم و تومورهای پوستی
Malignant diseases and skin tumors



بارداری در نواحی شکم و لگن
Pregnancy in abdominal and pelvic areas



وجود فلزات یا ایمپلنت در ناحیه درمان
Presence of metal implants in the treatment area



اختلالات انعقادی و مصرف داروهای رقیق کننده خون
Coagulation disorders and use of blood thinners



صرع و حساسیت به نور (فتوسنسیتیویته)
Epilepsy and photosensitivity



کاهش حس پوستی در ناحیه درمان
Reduced skin sensation in the treatment area

نکات ایمنی لیزر 650nm Laser Safety (650nm)



لیزر 650nm از 3R کلاس می‌باشد.
650nm laser is Class 3R.



استفاده از عینک محافظ توسط اپراتور الزامی است.
Protective eyewear is mandatory for the operator.



از تابش مستقیم لیزر به چشم خودداری شود.
Avoid direct exposure of laser to the eyes.



قطر ناحیه مورد نظر را درمان کنید.
Treat only the intended treatment area.



قبل از استفاده، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.
Read the user manual carefully before use.

توصیه های قبل و بعد از درمان Pre & Post Treatment Recommendations

قبل از درمان Before Treatment



پوست ناحیه درمان را تمیز کنید.
Clean the treatment area.



از روغن چرب کننده ارائه شده توسط AIGENER به مقدار مناسب استفاده کنید تا لغزدگی پوست حفظ شود.
Apply an appropriate amount of the AIGENER lubrication oil to keep the skin smooth and lubricated.

بعد از درمان After Treatment



استفاده از محصولات ترمیم کننده توصیه می‌شود.
Use restorative and soothing products.



تا 24 ساعت از نور مستقیم خورشید و منابع حرارتی دوری کنید.
Avoid direct sun exposure and heat sources for 24 hours.



پوست خود را مرطوب نگه دارید.
Keep your skin moisturized.

استانداردها و انطباق Standards & Compliance

IEC

IEC 60601-1
Medical Electrical
Equipment

CE

Medical
Device

RoHS

Environmental
Protection

✓

High Quality
& Safety

ISO

ISO 13485
Certified



استفاده از دستگاه فقط توسط افراد آموزش دیده مجاز می‌باشد.
Use of the device is only allowed by trained professionals.

STRiX

VACUUM

Professional Skin Regeneration Technology

فناوری نوین بازسازی پوست



تهران، دوراهی قلعهک، خیابان پابرجا،
بلوار آینه، گلیخ غربی، پلاک ۱۱
طبقه دوم، واحد ۲۰۳

Tehran, Qolhak Junction, Pabarja St.,
Ayeneh Blvd., West Golyakh St.,
No. 1, 2nd Floor, Unit 203



021-22392886



0916-2266870



www.bineshco.com



@aigener.medical



AIGENER
MEDICAL TECHNOLOGIES

Designed & Manufactured by AIGENER Medical Technologies

Science.
Precision.
Regeneration.

علم
دقت
بازسازی



www.bineshco.com
SCAN ME